



K DESENS 5%

1 jeringa desensibilizante con
nitrato de potasio 5%



Dentalsur2003 S.L.

Avda. Ortega y Gasset 152

29006 Málaga (Spain), +34 952 040 502

hola@ipgdental.com www.ipgdental.com

Servicio al profesional

984 491 808

hola@kiyomidental.com

Rx Only

ES Instrucciones de uso

Desensibilizante

Solo uso profesional

Lea con atención toda la información de este manual de instrucciones antes de comenzar su uso.

Descripción

Este kit contiene una jeringa de 3 ml de gel desensibilizante con nitrato de potasio al 5%, diseñado para aliviar la sensibilidad dental.

Este producto se presenta como una solución efectiva para reducir molestias asociadas con dientes sensibles.

Presentación

Jeringa de 3 ml y 1 punta para su aplicación.

Composición

Aqua, potassium nitrate, xylitol triethanolamine, carbolpol

Indicación del producto

Está indicado en el tratamiento de dientes con hipersensibilidad tanto en la existente previa al blanqueamiento dental como posterior.

Precauciones

Solo para uso dental externo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos; enjuagar con agua si ocurre.

No utilizar en caso de alergia a alguno de los ingredientes.

Efectos secundarios


- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas e intoxicación. En raras ocasiones, puede ocurrir irritación gingival o bucal.
- Es normal la aparición de sensibilidad dental durante el blanqueamiento. Si la sensibilidad es incómoda trate los dientes con un gel desensibilizante. Cuanto mayor la concentración de peróxido, mayor la posibilidad de sufrir sensibilidad dental.
- El blanqueamiento puede hacer aparecer o destacar áreas de hipocalcificación debido al blanqueamiento diferenciado (más intenso) de estas áreas. En algunos casos esas manchas desaparecen debido a la deshidratación del esmalte tras la finalización del blanqueamiento. El tratamiento con flúor de esas regiones también puede ayudar a su desaparición.
- Algunos pacientes pueden sentir leve irritación gingival, lengua o labios, generalmente por el uso en exceso de gel en la férula.

Si se experimenta algún síntoma adverso, suspenda el uso y consulte a un profesional de la salud.

Modo de uso

- Cepillarse los dientes: lave sus dientes con su pasta dental habitual.
- Aplicar gel desensibilizante en la férula dental: extraiga la tapa de la jeringa y aplique una pequeña cantidad de gel en la férula dental proporcionada.
- Mantener la férula en boca durante 30-40 minutos: coloque suavemente la férula dental en su boca, asegurándose de que el gel esté en contacto con los dientes sensibles.
- Retirar la férula y enjuagar: después del tiempo recomendado, retire la férula y enjuague su boca con agua tibia para eliminar cualquier residuo de gel.

Realice este procedimiento diariamente hasta que haya utilizado toda la jeringa. Si la sensibilidad persiste, consulte a su dentista.

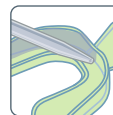

Conservación y almacenamiento

Almacene el producto en temperaturas entre 5°C y 25°C / 41°F y 77°F. No congele el producto. Protéjalo de la incidencia de la luz solar directa.

Advertencias

No utilice el producto fuera del plazo de validez. Mantenga fuera del alcance de los niños. Para el descarte del producto siga la Directiva 94/62/CE.

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no es responsable de los daños causados por otros usos o por manipulación incorrecta. Además, el usuario está obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por tanto, no poseen ningún vínculo.

Leyenda de símbolos / Meaning of symbols	
	Fecha de fabricación Date of manufacture
	Número de lote Batch Number
	Fecha de validez Shelf life
	Límites de temperatura Temperature limits
	No lo utilice si el envase está dañado Do not use if packaging is damaged
	Consérvelo seco Keep it dry
	Manténgalo lejos de la luz solar Keep protected from sunlight
	Fabricante Manufacturer
	Consulte las instrucciones de uso Refer to instructions for use
	Representante en la Comunidad Europea Representative in the European Community
	Marca CE para comercialización en la Comunidad Europea CE Mark for European Community market



K **DESENS** **5%**

Desensitizing syringe with
5% potassium nitrate



DentalSur2003 S.L.

Avda. Ortega y Gasset 152

29006 Málaga (Spain), +34 952 040 502

hola@ipgdental.com www.ipgdental.com

Customer Service

+34 984 491 808

hola@kiyomidental.com

Rx Only

EN Instructions manual

Desensitizer

For professional use only

Please read all the information in this instruction manual carefully before starting to use.

Description

This kit contains a 3 ml syringe of desensitizing gel with 5% potassium nitrate, designed to alleviate dental sensitivity. This product is presented as an effective solution to reduce discomfort associated with sensitive teeth.

Presentation

3 ml syringe and tip for application.

Composition

Aqua, potassium nitrate, xylitol triethanolamine, carbopol

Product indication

Indicated for the treatment of teeth with hypersensitivity, both pre-existing to dental whitening and post-treatment.

Precautions

For external dental use only.

Keep out of reach of children.

Avoid contact with eyes; rinse with water if it occurs.

Do not use in case of allergy to any of the ingredients.

Side Effects


- Ingesting large amounts of the product can cause nausea and poisoning. In rare cases, gingival or oral irritation may occur.
- Occasionally sensitivity may require treatment. If the sensitivity becomes uncomfortable, treat the teeth with a soothing desensitising gel. The more concentration of peroxide, greater the possibility of suffering dental sensitivity.
- Areas of hypocalcification can exist which may not be visible to the naked eye. Hypocalcified areas will whiten faster, thereby becoming more obvious during bleaching. In some cases these stains disappear owing to the dehydration of the enamel after concluding the bleaching. Treating these areas with fluoride can also help to make them disappear.
- Some users can feel slight irritation in the gingiva, tongue or lips, generally caused by excessive use of gel in the tray.

If any adverse symptoms are experienced, discontinue use and consult a healthcare professional.

Instructions for use

1. Brush your teeth: Clean your teeth with your regular toothpaste.
2. Apply desensitizing gel to the dental tray: Remove the syringe cap and apply a small amount of gel to the provided dental tray.
3. Keep the tray in your mouth for 30-40 minutes: Gently place the dental tray in your mouth, ensuring that the gel is in contact with the sensitive teeth.
4. Remove the tray and rinse: After the recommended time, remove the tray and rinse your mouth with warm water to eliminate any gel residue.

Repeat this procedure daily until the syringe is empty. If sensitivity persists, consult your dentist.

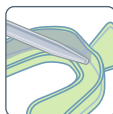

Preservation and Storage

Store the product at 5°C and 25°C / 41°F and 77°F. Do not freeze the product. Keep it out of direct sunlight.

Warning

Do not use the product after expiry date. Maintain it out of reach of children. The discard of product follows the directive 94/62/CE.

This material was only manufactured for dental use and must be handled according to the instructions for use. The manufacturer is not responsible for damage caused by other uses or incorrect handling. Besides this, the user is obliged to prove, before use and under his or her responsibility that this material is compatible with the use desired, mainly when this use is not indicated in the instructions for use. Data descriptions do not constitute any type of guarantee and so are not in way linked.

Legenda de símbolos / Meaning of symbols



Fecha de fabricación
Date of manufacture



Número de lote | Batch Number



Fecha de validez | Shelf life



Límites de temperatura
Temperature limits



No lo utilice si el envase está dañado
Do not use if packaging is damaged



Consérvelo seco | Keep it dry



Manténgalo lejos de la luz solar
Keep protected from sunlight



Fabricante | Manufacturer



Consulte las instrucciones de uso
Refer to instructions for use



Representante en la Comunidad Europea
Representative in the European Community



Marca CE para comercialización
en la Comunidad Europea |
CE Mark for European Community market